




Nächtliche Pulsoxymetrie – Anleitung für Patientinnen und Patienten

1 Legen Sie das Gerät am linken Handgelenk an, bevor Sie abends zu Bett gehen.

2 Schieben Sie den Ringsensor wie abgebildet auf den Daumen.

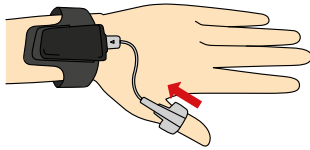


3 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie 1x auf die Ein-/Ausschalttaste auf der Seite drücken.

4 Nach einer kurzen Vibrationsbestätigung werden die Uhrzeit und der Akkuladestatus angezeigt.

5 Anschliessend erscheint auf dem Bildschirm **MODE**  gefolgt von **SLEEP MODE**

6 Die Messung beginnt nun automatisch.

7 Auf dem Bildschirm wird Ihre aktuelle Sauerstoffsättigung (SPO2) und Ihr Puls (❤️) angezeigt.

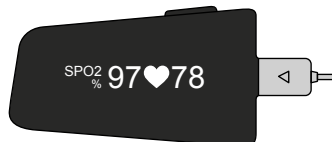

8 Der Ringsensor am Daumen leuchtet während der Messung rötlich.

9 Tragen Sie das Gerät während der ganzen Nacht. Die Aufzeichnungsdauer muss mindestens 5 Stunden betragen.

10 Beenden Sie die Messung am Morgen vor dem Aufstehen, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste während 3 Sekunden gedrückt halten.

11 Ziehen Sie das Gerät inkl. Ringsensor ab und legen Sie es zurück in die Schachtel.

12 Bringen Sie die Schachtel zurück in die Arztpraxis.